









فهرست محصولات

صفحه	محصول
۳	کیسه فصد خون
۴	کیسه ترانسفرتکی (غیر قابل تزریق)
۵	کیسه ترانسفرتکی (قابل تزریق)
۶	کیسه ترانسفردوتایی
۷	کیسه خون تکی (اتولوگ)
۸	کیسه خون تکی با بازوی نمونه گیری
۹	کیسه خون دوتایی
۱۰	کیسه خون دوتایی با بازوی نمونه گیری
۱۱	کیسه خون سه تایی
۱۲	کیسه خون سه تایی با بازوی نمونه گیری
۱۳	کیسه خون سه تایی با فیلتر خون کامل
۱۵	کیسه خون چهارتایی
۱۶	کیسه خون چهارتایی با بازوی نمونه گیری
۱۷	کیسه خون چهارتایی با فیلتر RBC
۱۹	کیسه خون دومحلوله
۲۰	کیسه خون دومحلوله با بازوی نمونه گیری
۲۱	ست کامل پلاسما فرزیس
۲۲	کیسه تکی حاوی محلول سدیم سیترات ۰.۴٪
۲۳	کیسه حاوی محلول ACD-A
۲۴	ست انتقال خون بند ناف
۲۵	کیسه جمع آوری خون بند ناف
۲۶	ست وای شکل
۲۷	ست فیلتر دار کنارتختی (بد ساید)

◀ کیسه فصد خون



تولید کننده	
کاربرد	جهت جمع آوری خون غیر قابل استفاده انسانی
بسته بندی	از نوع وی پک با اندیکاتور استریل - ETO مطابق با استاندارد ISO3826-1
ماندگاری	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
استریل	با استفاده از اتوکلاو (ETO)
استاندارد	ISO13485
کیسه خونگیری	کیسه خونگیری 450 ml مدیکال گرید
شیلنگ	از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
برچسب	مطابق با استاندارد ISO3826-1 همراه با بارکد ۱۲۸ ISBT حاوی اطلاعات بیج نامبر، تاریخ انقضا از جنس PVC
سوزن	G16
کاور سوزن	از جنس PP (پلی پروپیلن) سخت جهت محافظت از برخورد سوزن با اپراتور پس از خونگیری
کلمپ	از جنس PP (پلی پروپیلن) جهت قطع و وصل جریان خون

▶ Blood Bag Letting

Manufactured by	
Usage	To collect useless human blood
Packing	V pack type with steril indicator-ETO conforming to ISO3826-1 standard
Standard	ISO13485
Validity	30 month
Sterilization	Using autoclave ethylene oxide (ETO)
Plastic Tube	Transparent medical grade of PVC
Labels	Complying with ISO3826-1; Bath number and product identification code are reported also in barcode system according to the ISBT standard
Needle	G16
Needle Protection	Of hard pp (polypropylene) to protect the needle collision with the operator after bleeding
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Bag volume	450 ml

◀ کیسه ترانسفر تکی (غیر قابل تزریق)




تولید کننده	
کاربرد	جهت جمع آوری اجزا دور ریز خون
بسته بندی	از نوع وی پک با اندیکاتور استریل- ETO مطابق با استاندارد ISO3826-1
ماندگاری	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
استریل	با استفاده از اتوکلاو (ETO)
استاندارد	ISO13485
کیسه خونگیری	کیسه خونگیری ۳۵۰ الی ۴۰۰ ml مدیکال گرید با سه مجرا
کورد	از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
برچسب	مطابق با استاندارد ISO3826-1 همراه با بارکد ۱۲۸ ISBT حاوی اطلاعات بیج نامبر، تاریخ انقضا از جنس PVC
اسپایک	تکراهه (بدون مجرای هوا) از جنس ABS با درپوش PP

▶ Transfer Bag(Non Injectable)

Manufactured by	
Usage	To collect waste components of the blood
Packing	V pack type with sterile indicator-ETO conforming to ISO3826-1 standard
Validity	30 month
Sterilization	Using autoclave ethylene oxide(ETO)
Standard	Iso13485
Blood bag	From 350 to 400 ml medical grade with three duct blood bag
Plastic tube	Transparent medical grade of PVC
Labels	Complying with ISO3826-1; Bath number and product identification code are reported also in barcode system according to the ISBT 128 standard
Spike	The Single path (without air duct) from ABC with PP cap

◀ کیسه ترانسفر تکی (قابل تزریق)

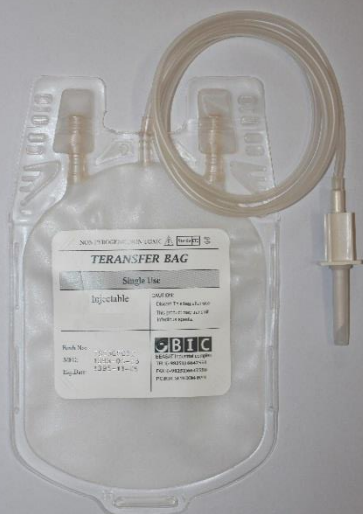

تولید کننده	جهت انتقال اجزای خون، سلول های بنیادی و پلاکت
کاربرد	استریل، قابل تزریق، فاقد مواد تب زا و اندوتوکسین
مشخصات	از نوع وی پک با اندیکاتور استریل - ETO مطابق با استاندارد ISO3826-1
بسته بندی	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد، ماندگاری در دمای ۴۰- تا ۱۳۰+ سانتی گراد به مدت ۴ سال و ماندگاری در دمای ۱۰- الی ۱۳۰+ به مدت ۳ سال
ماندگاری محصول	با استفاده از اتوکلاو (ETO)
استریل	ISO13485
استاندارد	در حجم های 350 الی 400 ml ، 400 الی 500 ml ، 500 الی 600 ml
کیسه خونگیری	از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
کورد	مطابق با استاندارد ISO3826-1 همراه با بارکد ۱۲۸ ISBT حاوی اطلاعات بیج نامبر، تاریخ انقضا از جنس PVC
برچسب	تکراهه (بدون مجرای هوا) از جنس ABS با درپوش PP
اسپایک	

► Transfer Bag (Injectable)

Manufactured by	
Usage	To transfer blood components, stem cells and transplants that are usable in practice ...
Specification	30 months from the date of manufacture in the standard conditions, durability at temperature 40- to 130+ ° C for 4 years and a shelf-life of 10-8 ° C 130+ for 3 years
Packing	V pack type with sterile indicator-ETO conforming to ISO3826-1 standard
Validity	30 month
Sterilization	Using autoclave ethylene oxide(ETO)
Standard	Iso13485
Blood bag	From 350 to 400 ml, 400 to 500 and 500 to 600 ml medical grade with three duct blood bag
Plastic tube	Transparent medical grade of PVC
Labels	Complying with ISO3826-1; Bath number and product identification code are reported also in barcode system according to the ISBT 128 standard
Spike	The Single path(without air duct) from ABC with PP cap

◀ کیسه ترانسفر دوتایی




تولید کننده	جهت جمع آوری اجزا دور ریز خون
کاربرد	با استفاده از اتوکلاو (ETO)
استریل	ISO13485
استاندارد	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
ماندگاری	از نوع وی پک با اندیکاتور استریل - ETO مطابق با استاندارد ISO3826-1
بسته بندی	کیسه خونگیری TOP&Bottom 450ml+450ml مدیکال گرید با سه مجرا
کیسه خونگیری	شیلنگ از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
برچسب	مطابق با استاندارد ISO3826-1 همراه با بارکد ۱۲۸ ISBT حاوی اطلاعات بیج نامبر، تاریخ انقضا از جنس PVC
اسپایک	تکراهه (بدون مجرای هوا) از جنس ABS با درپوش PP

► Double Transfer Bag

Manufactured by	
Usage	To collect waste components of the blood
Sterilization	Using autoclave ethylene oxide(ETO)
Standard	Iso13485
Validity	30 month
Packing	V pack type with steril indicator-ETO conforming to ISO3826-1 standard
Blood bag	450ml+top and bottom 450ml blood bags medical grade with three duct.
Plastic tube	Transparent medical grade of PVC
Labels	Complying with ISO3826-1; Bath number and product identification code are reported also in barcode system according to the ISBT 128 standard
Spike	The Single path(without air duct) from ABC with PP cap

◀ کیسه خون تکی (اتولوگ)

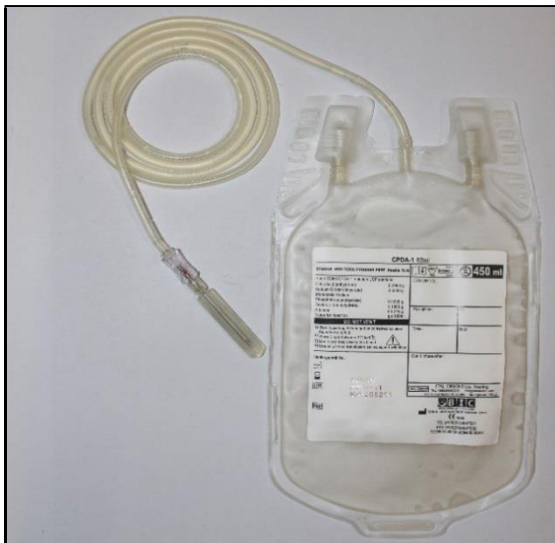


تولید کننده	کیسه خون تکی 450ml
حجم کیسه (مفید)	63ml CPDA-1 محلول ضد انعقاد خون
کاربرد	برای ذخیره سازی و جمع آوری خون اتولوگ (خون خودی)
ماندگاری	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
گواهی	نشان CE
استریل	با استفاده از اتوکلاو
سوزن	16G
محافظ سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین می نماید.
کلمپ	کلمپ برای اتصال و قطع جریان خون استفاده می شود.
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO3826-1
بسته بندی	مطابق استاندارد ISO 3826-1 و در صورت تقاضا فویل آلومینیوم سه لایه به ضخامت ۹۰ میکرون طبق استاندارد ISO 3826-1

▶ Single Blood Bag(Autolouge)

Manufactured by	
Bag volume(Usable)	450ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Usage	Single bag CPDA1-450ml for storage and whole blood collected
Validity	30 month
Certification	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
“Y” connectors	Y connectors is used to divide the volume of blood flow .to avoid turbulence to the blood components flow
Labels	Complying with ISO3826-1; Bath number and product identification code are reported also in barcode system according to the ISBTstandard
Packing	Three- layer aluminum with thickness of 90 micron according to ISO 3826-1 standard.

◀ کیسه خون تکی با بازوی نمونه گیری

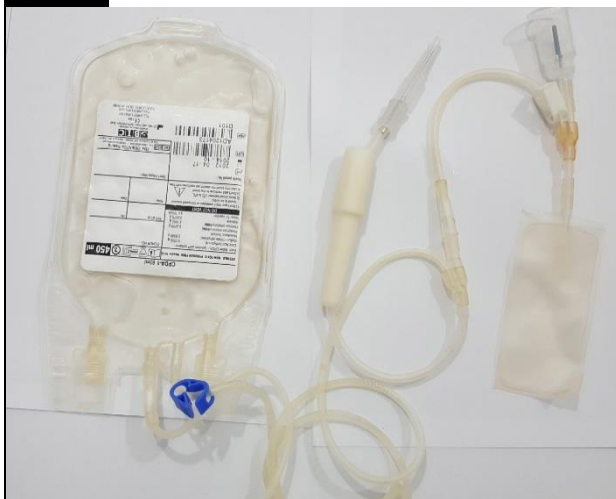

تولید کننده	450 ml
حجم کیسه (مفید)	CPDA1 63 ml
محلول ضد انعقاد	برای جمع آوری و نگه داری اجزاء کامل خون
کاربرد	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگهداری استاندارد دارویی
ماندگاری	نشان CE
گواهی	با استفاده از اتوکلاو
استریل	16G
سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
محافظ سوزن	به منظور جمع آوری نمونه های اولیه بوسیله لوله های خلاء برای انجام آزمایشات دهنده ی خون استفاده می گردد
سیستم نمونه گیری	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود
کلمپ	PVC مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD و مطابق با فارماکوپه US و استاندارد ISO3826-1
فیلم بسته بندی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
قطعه شکستنی	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
اتصال دهنده وای شکل	مطابق با استاندارد ISO3826-1 و همراه با بارکد ISTB حاوی اطلاعات بیچ نامبر.
برچسب	فیلم بسته بندی و فویل آلومینیوم
بسته بندی	

► Single blood bag with sampling arm system

Manufactured by	
Bag volume	450ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Usage	For collection and storage whole blood
Validity	30 month
Certification	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Sampling System	In order to collect prototypes. the vacuum tubes are used to perform blood- donor tests.
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over rapping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
“Y” connectors	The Y connectors is used to divide the volume of blood flow .to avoid turbulence to the blood components flow
Labels	Complying with ISO3826-1; Bath number and product identification code are reported also in barcode system according to the ISBT standard
Packing	Packing Film and aluminum foil

◀ کیسه خون دو تایی



تولید کننده	
حجم کیسه ها	350/450ml
محلول ضد انعقاد	CPDA-1 63ml
کاربرد	جهت جمع آوری اجزاء کامل خون، تهیه و نگهداری گلبول قرمز
ماندگاری	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگه داری استاندارد دارویی
گواهی	نشان CE
استریل	با استفاده از اتوکلاو
سوزن	16G
محافظ سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
کلمپ	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
فیلم بسته بندی	PVC مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون میشود.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بیچ نامبر.
بسته بندی	مطابق با استاندارد ISO 3826-1

▶ Double Blood Bag

Manufactured by	
Bag Volume	450/350 ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Usage	For collection of whole blood , preparation and storage of red blood cell.
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over raping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume of blood flow .to avoid turbulence to the blood components flow
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون دو تایی با بازوی نمونه گیری



تولیدکننده	350/450ml
حجم کیسه ها	CPDA-1 63 ml
داروی ضد انعقاد	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگهداری استاندارد دارویی
ماندگاری	نشان CE
گواهی	با استفاده از اتوکلاو
استریل	16G
سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
محافظ سوزن	به منظور جمع آوری نمونه های اولیه بوسیله لوله های خلاء برای انجام آزمایشات دهنده ی خون استفاده می گردد
سیستم نمونه گیری	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود
کلمپ	PVC مدیکال گرید (کلاس VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه US و استاندارد ISO 3826-1
فیلم بسته بندی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
قطعه شکستنی	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
اتصال دهنده وای شکل	برای جمع آوری تمام اجزاء خون ، تهیه و نگه داری گلبول قرمز
کاربرد	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISTB حاوی اطلاعات بیچ نامبر.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1
بسته بندی	

► Double blood bag with sampling arm system

Manufactured by	Beasat industrial complex
Bag Volume	450/350 ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Usage	For collection of whole blood preparation and storage of red blood cell
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Sampling system	In order to collect prototypes. the vacuum tubes are used to perform blood- donor tests.
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over rapping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The Y connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون سه تایی



تولیدکننده	
حجم کیسه ها	350/350/450ml
محلول ضد انعقاد	CPDA-1 63ml
کاربرد	برای جمع آوری خون کامل، تهیه و توزیع محصولاتمانند پلاسما، گلبول قرمز و پلاکت
ماندگاری	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگه داری استاندارد دارویی
گواهی	نشان CE
استریل	با استفاده از اتوکلاو
سوزن	16G
محافظ سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
کلمپ	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
فیلم بسته بندی	PVC مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بچ نامبر.
بسته بندی	مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► Triple Blood Bag

Manufactured by	
Bag Volume	450/350/350 ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Usage	For collection of whole blood , preparation and storage of products like plasma , red blood cell and platelet.
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over rapping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون سه تایی با بازوی نمونه گیری



تولیدکننده	350/350/450ml
حجم کیسه ها	CPDA-1 63ml
داروی ضد انعقاد	برای جمع آوری خون کامل، تهیه و نگه داری RBC ، گرانولوسیت، پلاکت و پلاسما
کاربرد	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگه داری استاندارد دارویی
ماندگاری	نشان CE
گواهی	با استفاده از اتوکلاو
استریل	16G
سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
محافظ سوزن	به منظور جمع آوری نمونه های اولیه بوسیله لوله های خلاء برای انجام آزمایشات دهنده ی خون استفاده می گردد
سیستم نمونه گیری	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
کلمپ	PVCمدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
فیلم بسته بندی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
قطعه شکستنی	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
اتصال دهنده وای شکل	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بچ نامبر.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1
بسته بندی	

▶ Triple Blood Bag with sampling arm system

Manufactured by	
Bag Volume	450/350/350 ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Usage	For collection of whole blood, preparation and storage like plasma , red blood cell and platelet.
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Sampling System	In order to collect prototypes. the vacuum tubes are used to perform blood- donor tests.
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1specification. Plasticizer DEHP. Over raping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون سه تایی با فیلتر خون کامل




تولیدکننده	
حجم کیسه ها	350/350/450ml
داروی ضد انعقاد	CPDA-1 63ml
کاربرد	آماده سازی خون غلیظ و فیلتر شده ، پلاکت ناچیز پلاسما
ماندگاری	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگه داری استاندارد دارویی
گواهی	نشان CE
استریل	با استفاده از اتوکلاو
سوزن	16G
محافظ سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
سیستم نمونه گیری	به منظور جمع آوری نمونه های اولیه بوسیله لوله های خلاء برای انجام آزمایشات دهنده ی خون استفاده می گردد
فیلتر	فیلتر جهت حذف لکوسیت از یک واحد خون کامل مکانیزم فیلتر برای حذف لکوسیت به صورت جذب و انسداد لکوسیت ها می باشد
ماده فیلتر	پلی استر سازگار با محیط زیست
راندمان حذف لکوسیت	$<1.0 \times 10^6$
حذف پلاکت	$>90\%$
بهبود خون	$>90\%$
کلمپ	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
فیلم بسته بندی	مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بچ نامبر.
بسته بندی	مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► Triple blood bag with filter for whole blood

Manufactured by	
Bag Volume	450/350/350 ml
Anticoagulant	CPDA1 63ml
Usage	Preparation of: Concentrated and filtered red cell. Platelet poor plasma (ppp).
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Sampling System	In order to collect prototypes. the vacuum tubes are used to perform blood-donor tests.
Filter	Filter for leukocyte removal from one unit of whole blood. The mechanism of filter to removal leukocyte is ABSORPTION and blockage of leukocytes.
Filtering matter	Biocompatible polyester.
Leukocyte removal efficiency	$< 1.0 \times 10^6$
Platelet removal	$> 90\%$
Red cell recover	$> 90\%$
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over raping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون چهار تایی

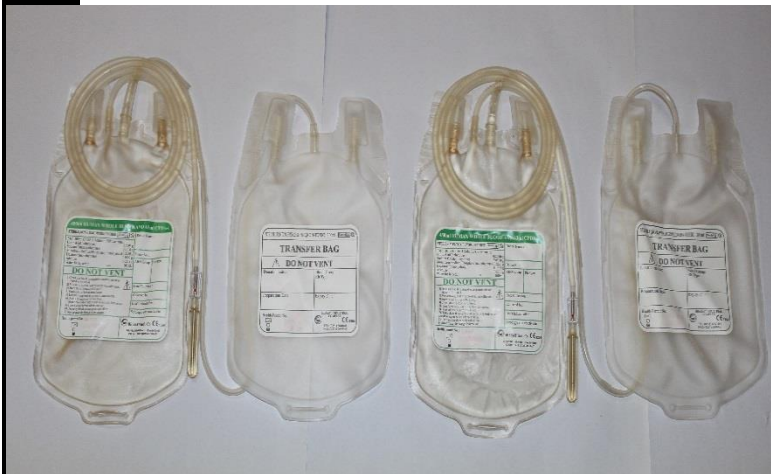

تولید کننده	
حجم کیسه ها	350/350/350/450ml
محلول ضد انعقاد	CPDA-1 63ml
ماندگاری	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
گواهی	نشان CE
استریل	با استفاده از اتوکلاو
استاندارد	ISO13485
سوزن	G16
محافظ سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
کلمپ	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
فیلم بسته بندی	PVC مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
کاربرد	جهت جمع آوری خون کامل، تهیه و نگه داری RBC، گرانولوسیت، پلاکت و پلاسما
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بیچ نامبر.
بسته بندی	مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► Quadruple Blood Bag

Manufactured by	
Bag Volume	450/350/350/350 ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Needle	G16
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over rapping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Usage	For collection whole blood , preparation and storage of RBC , Granulocyte , platelet and plasma
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون چهار تایی با بازوی نمونه گیری



تولید کننده	350/350/350/450ml
حجم کیسه ها	CPDA-1 63ml
داروی ضد انعقاد	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگه داری استاندارد دارویی
ماندگاری	نشان CE
گواهی	با استفاده از اتوکلاو
استریل	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
کلمپ	G16
سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
محافظ سوزن	به منظور جمع آوری نمونه های اولیه بوسیله لوله های خلاء برای انجام آزمایشات دهنده ی خون استفاده می گردد
سیستم نمونه گیری	PVCمدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
فیلم بسته بندی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
قطعه شکستی	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
اتصال دهنده وای شکل	جهت جمع آوری خون کامل، تهیه و نگه داری RBC، گرانولوسیت، پلاکت و پلاسما
کاربرد	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بیج نامبر.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1
بسته بندی	

► Quadruple Blood Bag with sampling arm system

Manufactured by	
Bag Volume	450/350/350/350 ml
Anticoagulant	CPDA-1 63ml
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Sampling System	In order to collect prototypes, the vacuum tubes are used to perform blood- donor tests.
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over raping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Usage	For collection whole blood , preparation and storage of RBC , Granulocyte , platelet and plasma.
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون چهار تایی با فیلتر RBC




تولید کننده	
حجم کیسه ها	450/450/450/350ml
محلول ضد انعقاد	CPD 63ML/ SAGM 100ML
کاربرد	آماده سازی: خون غلیظ و فیلتر شده. -محلول CPD جهت جمع آوری و نگه داری خون کامل به مدت ۳۵ روز استفاده می شود. -محلول SAGM جهت نگه داری گلبول قرمز به مدت ۴۲ روز استفاده می شود.
ماندگاری	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگه داری استاندارد دارویی
گواهی	نشان CE
استریل	با استفاده از اتوکلاو
سوزن	G16
محافظ سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
سیستم نمونه گیری	به منظور جمع آوری نمونه های اولیه بوسیله لوله های خلاء برای انجام آزمایشات دهنده ی خون استفاده می گردد
فیلتر	جهت حذف لکوسیت . مکانیسم فیلتر برای حذف لکوسیت، جذب و انسداد لکوسیت ها است.
ماده فیلتر	پلی استر سازگار با محیط زیست
راندمان حذف لکوسیت	$<1.0 \times 10^6$
بازیابی سلول قرمز	$>90\%$
کلمپ	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
فیلم بسته بندی	مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بیچ نامبر.
بسته بندی	مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► Quadruple blood bag with filter for RBC

Manufactured by	
Bag Volume	450/450/450/350ml
Anticoagulant	CPD 63ml / SAGM 100ml
Usage	Preparation of: Concentrated and filtered red cell) CPD solution is used for collecting and storage whole blood for 35 days. SAGM solution is used for Storage red blood cell for 42 days.
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Sampling System	In order to collect prototypes. the vacuum tubes are used to perform blood- donor tests.
Filter	Filter for leukocyte removal from RBC. The mechanism of filter to removal leukocyte is ABSORPTION and blockage of leukocytes.
Filtering matter	Biocompatible polyester.
Leukocyte removal efficiency	$< 1.0 \times 10^6$
Red cell recover	$> 90\%$
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over rapping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

◀ کیسه خون دو محلوله

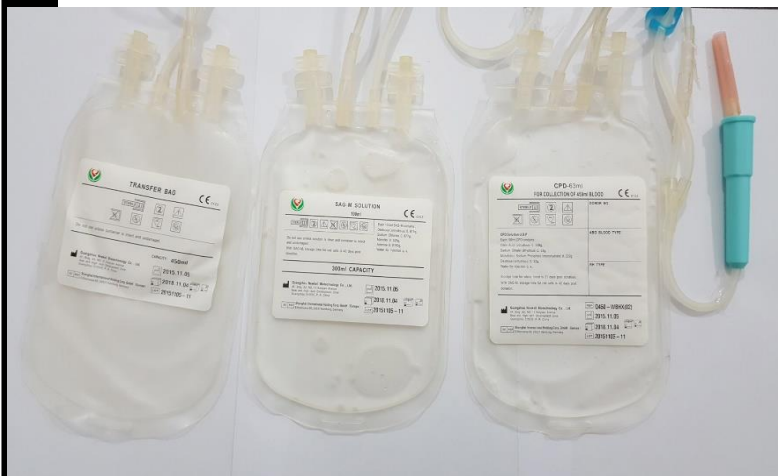


تولید کننده	350/450/450ml
حجم کیسه ها	CPD 63ml
ضد انعقاد	CE نشان
گواهی	با استفاده از اتوکلاو
استریل	SAGM 100ml
محلول محافظ	16G
سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
محافظ سوزن	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
کلمپ	PVC مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایز PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
فیلم بسته بندی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
قطعه شکستنی	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
اتصال دهنده وای شکل	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط نگه داری استاندارد دارویی
ماندگاری	محلول CPD جهت جمع آوری و نگه داری خون کامل به مدت ۳۵ روز استفاده می شود. محلول SAGM جهت نگه داری گلبول قرمز به مدت ۴۵ روز استفاده می شود. کیسه دوم جهت جمع آوری پلاکت استفاده می شود.
کاربرد	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بچ نامبر.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1
بسته بندی	

► Blood bag CPD/SAGM

Manufactured by	
Bag Volume	450/450/350 ml
Anticoagulant	CPD 63ML
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Preservation solution	SAGM 100ML
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over rapping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Validity	30 month
Usage	CPD solution is used for collecting and storage whole blood for 35 days. SAGM solution is used for storage red blood cell for 42 days and secondary bag is used for collecting platelet
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

کيسه خون دو محلوله با بازوی نمونه گیری

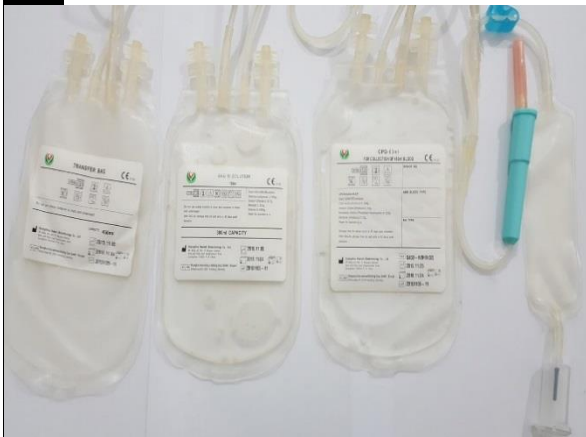

تولیدکننده	
حجم کيسه ها	450/450/350ml
داروی ضد انعقاد	CPD 63 ml
ماندگاری	سی ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
گواهی	نشان CE
استریل	با استفاده از اتوکلاو
محلول محافظ	SAGM 100ml
کاربرد	محلول CPD جهت جمع آوری و نگهداری خون کامل به مدت ۳۵ روز استفاده می شود. محلول SAGM جهت نگه داری گلبول قرمز به مدت ۴۲ روز استفاده می شود. و کيسه دوم جهت جمع آوری پلاکت استفاده می شود.
سوزن	G16
محافظ سوزن	محافظ این سوزن از باز شدن اتفاقی آن جلوگیری و بی نقصی این محصول را تضمین مینماید
سیستم نمونه گیری	به منظور جمع آوری نمونه های اولیه بوسیله لوله های خلاء برای انجام آزمایشات دهنده ی خون استفاده می گردد
کلمپ	جهت قطع و وصل جریان خون استفاده می شود.
فیلم بسته بندی	PVC مدیکال گرید کلاس (VI) با پلاستی سایزر PEHD مطابق با فارماکوپه و استاندارد ISO3826-1
قطعه شکستنی	حالت مخروطی که باعث عبور آسان و بدون صدمه رساندن به جریان اجزای خون می شود
اتصال دهنده وای شکل	به منظور تقسیم حجم جریان خون می باشد که موجب جلوگیری از بی نظمی تلاطم گردش اجزای خون می شود.
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT حاوی اطلاعات بیچ نامبر.
بسته بندی	مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► Blood bag CPD/SAGM with sampling arm system

Manufactured by	
Bag Volume	450/450/350ml
Anticoagulant	CPD 63ML
Validity	30 month
Certifications	CE MARKED
Sterilization	Super heated water spray.
Preservation solution	SAGM 100ML
Usage	CPD solution is used for collecting and storage whole blood for 35 days. SAGM solution is used for storage red blood cell for 42 days and secondary bag is used for collecting platelet .
Needle	16G
Needle Protection	The needle protection is welded. This avoids occasional opening and guarantees the product integrity
Sampling System	In order to collect prototypes. the vacuum tubes are used to perform blood- donor tests.
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic Film	Medical grad PVC (class VI) complying with US pharmacopoeia and with ISO 3826-1 specification. Plasticizer DEHP. Over raping is purchased from valid certificate sources.
Break-off connectors	A cone mode cause that passes easily and without damaging the flow of blood components.
"Y" connectors	The ((Y)) connectors is used to divide the volume to avoid turbulence to the blood components flow.
Labels	Complying with ISO 3826-1 standard. Batch number and product identification code are reported also in bar code system according to the ISBT standard.
Packing	Complying with ISO 3826/1 Standard

ست کامل پلاسما فرزیس




تولید کننده	جهت جداسازی فرآورده های خون از خون کامل
کاربرد	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
ماندگاری	با استفاده از اتوکلاو (ETO)
استریل	ISO13485
استاندارد	مجموعه قطعات معرفی شده در REF BHS0125
ست هارنس	مجموعه قطعات بصورت استوانه ای شکل جهت بکارگیری در دستگاه PCS2
گوی	مجموعه قطعات معرفی شده در REF BB1111
کیسه ترانسفر	از نوع وی پک با اندیکاتور استریل – ETO مطابق با استاندارد
بسته بندی	

► Plasmapheresis Set

Manufactured by	
Usage	For the separation of blood products from the whole blood.
Packing	V pack type with steril indicator-ETO conforming to ISO3826-1 standard
Validity	30 month
Sterilization	Using autoclave ethylene oxide(ETO)
Standard	ISO13485
Hurence set	The set of components introduced in REF BHS0125
pellet	Component parts are cylindrical shaped for use on pcs2 set.
Transfer bag	The set of components introduced in REF BB1111.
Paking	V pack type with steril indicator- ETO conforming to the standard.

◀ کیسه تکی حاوی محلول سدیم سیترات ۴٪

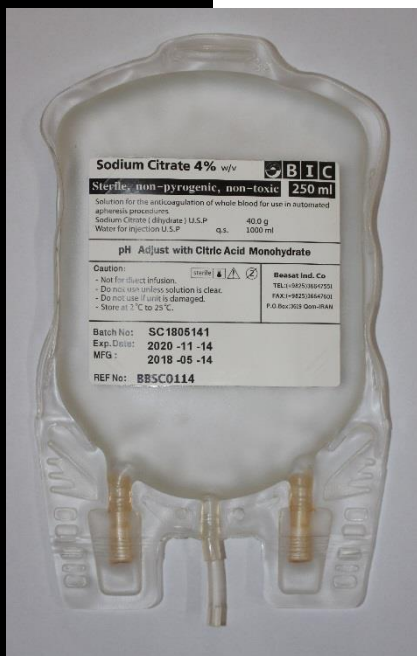

تولید کننده	
کاربرد	محلول جهت شستشو و یا جدا سازی پلاسما از خون کامل
ماندگاری	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
استریل	با استفاده از اتوکلاو
استاندارد	USP
کیسه محلول	کیسه محلول ۳۵۰ الی ۴۰۰ cc PVC مدیکال گرید با سه مجرا
بسته بندی اولیه	مطابق با ISO 3826-1 از مواد PET به ضخامت ۷۰ میکرون
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT 128 حاوی اطلاعات بیج نامبر ، تاریخ انقضاء از جنس PVC
محلول	سدیم سیترات دی هیدرات به غلظت ۴٪ Sodium citrate (dehydrate) 4%
بسته بندی نهایی	مطابق استاندارد ISO 3826-1 و در صورت تقاضا فویل آلومینیوم سه لایه به ضخامت ۹۰ میکرون طبق استاندارد ISO 3826-1

▶ Single bag containing sodium citrate solution 4%

Manufactured by	
Usage	A solution for washing or separating the plasma from the full blood.
Packing	V pack type with steril indicator-ETO conforming to ISO3826-1 standard
Validity	30 month
Sterilization	Super heat water autoclave.
Standard	USP
Solution bag	350 to 400cc medical grade pvc with three duct Solution bag.
Primary packing	According to ISO3826-1 of a 70 micron thick PET material.
Labels	1-complying with ISO3826-1 standard. 2-batch number and product identification code are reported also in barcod system according to ISBT 128 standard. Expiration date from pvc.
Solution	Sodium citrate dehydrate 4%.
The final package	Three- layer aluminum with thickness of 90 micron according to ISO 3826-1 standard.




◀ کیسه محتوی محلول ACD-A

تولید کننده	
کیسه محلول	کیسه محلول ۵۰۰ CC مدیکال گرید
کاربرد	جهت جداسازی فرآورده پلاسما از خون کامل
ماندگاری	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
استریل	با استفاده از اتوکلاو
استاندارد	ISO13485
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT 128 حاوی اطلاعات بچ نامبر ، تاریخ انقضاء از جنس PVC
بسته بندی	مناسب جهت استریل به روش Super Hot Water Spray مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► The bag content of ACD-A soluble

Manufactured by	
Solution bag	500cc medical grade.
Usage	For the separation of plasma product from the whole blood.
Validity	30 month
Sterilization	Super heat water autoclave.
Standard	ISO13485
Labels	1-complying with iso3826-1 standard. 2-batch numbers and product identification code are reported also in barcod system according to the ISBT 128 standard.
Packing	Suitable for sterilation by super hot water spray according to ISO3826-1 standard

ست انتقال خون بند ناف

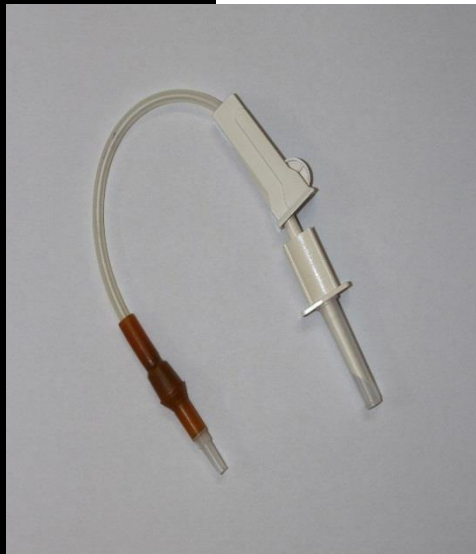

تولید کننده	جهت انتقال خون بند ناف به خارج از کیسه خون بند ناف
کاربرد	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
ماندگاری	با استفاده از اتوکلاو اتیلن اکساید ETO
استریل	ISO13485
استاندارد	تکراهه (بدون مجرای هوا) از جنس ABS با در پوش PP
اسپایک	از جنس ABS جهت کنترل جریان خون
رولر کلمپ	از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
شیلنگ	از نوع وی پک با اندیکاتور استریل – ETO مطابق با استاندارد ISO 3826-1
بسته بندی	

► Cord blood set

Manufactured by	
Usage	To transfer umbilical cord blood out of the umbilical cord blood bag
Validity	30 month
Sterilization	Using autoclave ethylene oxide.(ETO)
Standard	ISO13485
Spike	The Single path(without air duct) from ABC with PP cap
Roller clamp	From ABC to control blood flow.
Plastic tube	transparents medical grade of pvc.
Packing	V pack type with sterile indicator- ETO conforming to ISO3826-1 standard.




◀ کیسه جمع آوری خون بند ناف

تولید کننده	کیسه خونگیری 250 cc مدیکال گرید با سه مجرا
کاربرد	جهت جمع آوری خون بند ناف
ماندگاری	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
استریل	با استفاده از اتوکلاو
استاندارد	ISO13485
سوزن	16G
کاور سوزن	از جنس PP سخت جهت حفاظت از برخورد سوزن با اپراتور پس از خونگیری
کلمپ	از جنس PP جهت قطع و وصل جریان خون
شیلنگ	از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
برچسب	مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با بارکد ISBT 128 حاوی اطلاعات بچ نامبر ، تاریخ انقضاء از جنس PVC
بسته بندی	استریل به روش Super Hot Water Spray مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► Cord blood bag

Manufactured by	
Blood bag	250cc medical grade whit three duct.
Usage	To collect umbilical cord blood
Validity	30 month
Sterilization	Sterile by super hot water spray method
Standard	ISO13485
Needle	16G
Needle Protection	Of hard pp(polypropylene) to protect the needle collision with the operator after bleeding
Clamp	Clamp is used for connecting and disconnecting blood flow
Plastic tube	transparents medical grade of pvc.
Labels	1-complying with iso3826-1 standard. 2-batch number and product identification code are reported also in barcode system according to the ISBT 128 standard. expiration date from pvc.
Packing	V pack type with sterile indicator- ETO conforming to ISO3826-1 standard.

ست تزریق خون دو راه (دو اسپایکه)

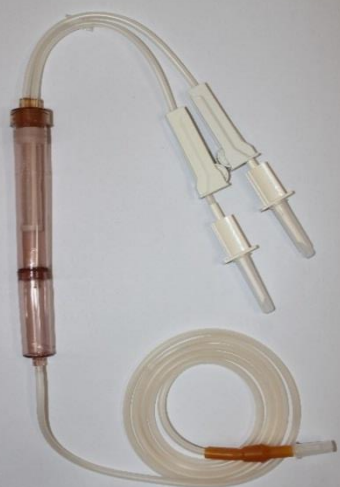

تولید کننده	کاربرد
برای تزریق خون و مشتقات خونی از طریق آنژیوکت، اسکالپ وین یا هرگونه بازنگهدارنده رگ توام با تزریق محلول رقیق کننده و یا برای تزریق هم زمان دو نوع مشتق خونی از این ست استفاده میشود. پلاسما فرزیس دستی	
ماندگاری	۳۰ ماه از تاریخ تولید در شرایط استاندارد نگهداری
استریل	با استفاده از اتوکلاو اتیلن اکساید ETO
استاندارد	ISO13485
اسپایک	تکراهه (بدون مجرای هوا) از جنس ABS با در پوش PP
دریپ چمبر	دارای دو محفظه PVC با مش ۱۷۰ میکرون
رولر کلمپ	از جنس ABS جهت کنترل جریان خون و محلول
شیلنگ	از جنس PVC مدیکال گرید شفاف
بسته بندی	از نوع وی پک با اندیکاتور استریل – ETO مطابق با استاندارد ISO 3826-1

► Y- type infusion set

Manufactured by	
Usage	is used. For injecting blood and blood derivatives through peripheral venous catheter, scalp vein or any reposer vessels with thinner solution and or simultaneous injection of two the type of blood derivative . for use is manual plasmafrisis processing.
Validity	30 month
Sterilization	Using autoclave ethylene oxide ETO
Standard	ISO13485
Spike	The Single path(without air duct) from ABC with PP cap
Drip chamber	Include two pvc chamber with 170 micron mesh.
Roller clamp	From ABC to control blood flow and soluble.
Plastic tube	transparent medical grade of pvc.
Packing	V pack type with sterile indicator-ETO according to ISO3826-1 standard.

◀ ست فیلتر دار کنار تختی (بد ساید)



تولید کننده	
کاربرد	برای حذف لکوسیت از یک واحد بسته بندی شده سلول های قرمز یا کل خون در طی انتقال خون در کنار تخت بیمار
استریل	با استفاده از اتوکلاو (ETO)
کارایی	کمتر از 1×10^a لکوسیت باقی مانده در واحد
بازایی سلول قرمز	متوسط آن بیشتر از ۸۵٪، مسدود کردن فیلتر تا حجم ۳۰ میلی لیتر.
زمان سرعت تصفیه	حدود ۱۵ دقیقه
مدت زمان نگهداری	دو سال (در بسته بندی پلمپ شده)

► Leukocyte Reduction Bed Side Filter Set

Manufactured by	
Usage	For removal of Leukocyte from one single unit of packed red cells or whole blood during blood transfusion at patient's bed side.
Sterilization	ETO
Performance	Less them 1×10^a residual leukocytes per unit.
Red cell recovery	Averaging greater them 85%; filter housing hold up volume of up to 30 ml.
Rapid filtration time	Average 15 min.
Hold time	2 Years in unopened pack.



Products

Product	page
Blood Bag Letting	3
Transfer Bag(Non Injectable)	4
Transfer Bag (Injectable)	5
Double Transfer Bag	6
Single Blood Bag(Autolouge)	7
Single blood bag with sampling arm system	8
Double Blood Bag	9
Double blood bag with sampling arm system	10
Triple Blood Bag	11
Triple Blood Bag with sampling arm system	12
Triple blood bag with filter for whole blood	13
Quadruple Blood Bag	15
Quadruple Blood Bag with sampling arm system	16
Quadruple blood bag with filter for RBC	17
Blood bag CPD/SAGM	18
Blood bag CPD/SAGM with sampling arm system	20
Plasmapheresis Set	21
Single bag containing sodium citrate solution 4%	22
The bag content of ACD-A soluble	23
Cord blood set	24
Cord blood bag	25
Y- type infusion set	26
Leukocyte Reduction Bed Side Filter Set	27

